

呼気ガス分析用マスク

●エアクッション採気マスクシリーズ [Model: AirMask-S,M,L]

ヘッドバンド型 「構成: マスク本体(S, M, Lサイズ)、ヘッドバンド、フック」



[Model: AirMask-TypeA (S,M,L)]

フェイス部はゴム製エアクッションを採用し、クッションの強さは、エアの調節により可能なため、被験者の顔の大きさや、凹凸に合わせることができ、漏れにくい構造です。マスク本体部は透明の樹脂製ボディです。ダグラスバッグの採気にも最適です。呼気、吸気ポート口径は35口径です。採気用蛇管が直接接続可能です。

ヘッドバンドはシリコン製の多穴式4点止めフック付きです。バンドフックはステンレス製です。この構成が標準構成品です。

メッシュネットキャップ型 「構成: マスク本体(S, M, Lサイズ)、ヘッドキャップ、フック」



Model: [AirMask-TypeB (S,M,L)]

エアクッションマスクを米国ハンスドルフ社のメッシュヘッドキャップと専用フックで固定するアセンブリです。頭部全体で固定で、バンドの長さ調整がマジックテープ式で調整出来ますので、運動用に適しています。

マジックテープヘッドギア型 「構成: マスク本体(S, M, Lサイズ)、ヘッドギア、フック」



Model: [AirMask-TypeC (S,M,L)]

エアクッションマスクを米国ハンスドルフ社の新型ヘッドギアで固定するアセンブリです。Red & Grayのツートンカラーで、全ての面で固定可能なオールマジックテープ型のヘッドギアと専用フックの構成です。取り扱いが便利で、固定もしっかりしています。運動用に適しています。

●601M型採気マスクアセンブリ [Model: 601M]



標準構成: マスク本体(Mサイズのみ)、ヘッドバンド

フェイス部はシリコンゴム製を採用し、吸気ポートは左右2カ所に設け、吸気抵抗を軽減しています。呼気ポート口径は35口径です。

ポート弁 [Model: 601M-1]

マスクバンド [Model: 601M-2]

☆本品の外観及び仕様は改善のため変更する場合があります

〒277-0005 千葉県柏市柏4-11-17 イワダテビル

TEL 04-7169-7050 FAX 04-7169-1470

Mail: mail@arcosystem.co.jp

http://www.arcosystem.co.jp



有限会社アルコシステム
ARCOSYSTEM INC.

CAT.08MKC

●ハンズドルフ社 7450 シリーズフェイスマスクアセンブリ



マスク+ポートアダプタ+マジックテープヘッドギアアセンブリ




マスク+T-Shape 2WayValve+マジックテープヘッドギアアセンブリ



マスク+Y-Shape 2WayValve+マジックテープヘッドギアアセンブリ

マスクサイズは、Petite, Extra S, S, M, Lの5サイズがあります。

●ハンズドルフ社2WayValveアセンブリ及び補器

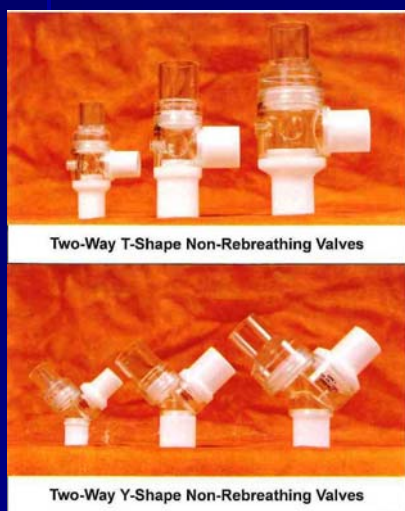

Two-Way T-Shape Non-Rebreathing Valves

Two-Way Y-Shape Non-Rebreathing Valves


T-Shape
2WayValve



Y-Shape
2WayValve



マスク、2WayValve
直付けアダプタ

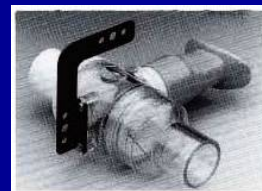

2WayValve+マウスピース
+吊り下げホルダ



2WayValve+ヘッドホルダ

2WayValve
口径各サイズ有ります

ハンズドルフ社製マスクアセンブリ及び2Wayvalveなどは、多岐にわたり豊富なラインナップがございます。選定に際しては

- ・シングルポート(弁の無い一つのポート)か2Way(吸気、呼気が分離できる弁がついた物)か
- ・口径(運動用は35口径、安静・臨床用は22口径が多く使用されています)
- ・形(T型、Y型)

などを指定の上、お問い合わせ下さい。

☆特殊アダプターも製作致します

〒277-0005 千葉県柏市柏4-11-17 イワダビル

TEL 04-7169-7050 FAX 04-7169-1470

Mail: mail@arcosystem.co.jp

http://www.arcosystem.co.jp



有限会社アルコシステム
ARCOSYSTEM INC.

CAT.17MK-H