

# 呼気ガス分析用マスク

## エアクッション採気マスクシリーズ [Model: AirMask-S,M,L]

**ヘッドバンド型** 構成：マスク本体(S, M, Lサイズ)、ヘッドバンド、フック



### Model: AirMask-TypeA (S,M,L)

フェイス部はゴム製エアクッションを採用しクッションの強さはエアの調節により可能なため、被験者の顔の大きさや凹凸に合わせることができ漏れにくい構造です。

マスク本体部は透明の樹脂製ボディで、ダグラスバッグの採気にも最適です。  
呼気、吸気ポート口径は35口径で採気用蛇管が直接接続可能です。  
ヘッドバンドはシリコン製の多穴式4点止めフック付きで、バンドフックはステンレス製です。  
この構成が標準構成品となります。

**メッシュネットキャップ型** 構成：マスク本体(S, M, Lサイズ)、ヘッドキャップ、フック



### Model: AirMask-TypeB (S,M,L)

エアクッションマスクを米国ハンスルドルフ社のメッシュヘッドキャップと専用フックで固定するアセンブリです。

頭部全体で固定で、バンドの長さ調整がマジックテープ式で調整出来ますので運動用に適しています。

**マジックテープヘッドギア型** 構成：マスク本体(S, M, Lサイズ)、ヘッドギア、フック



### Model: AirMask-TypeC (S,M,L)

エアクッションマスクを米国ハンスルドルフ社の新型ヘッドギアで固定するアセンブリです。  
Red & Grayのツートンカラーで、全ての面で固定可能なオールマジックテープ型のヘッドギアと専用フックの構成です。

取り扱いが便利で、固定もしっかりしています。運動用に適しています。

**601M型採気マスクアセンブリ** 構成：マスク本体(Mサイズのみ)、ヘッドバンド



### Model: 601M

フェイス部はシリコンゴム製を採用し、吸気ポートは左右2カ所に設け吸気抵抗を軽減しています。

呼気ポート口径は35口径です。

Model: 601M-1 ポート弁

Model: 601M-2 マスクバンド

\* 本品の外観及び仕様は改善のため変更する場合があります




有限会社アルコシステム

## ハンスドルフ社 7450 シリーズフェイスマスクアセンブリ



マスク+ポートアダプタ  
+マジックテープヘッドギア

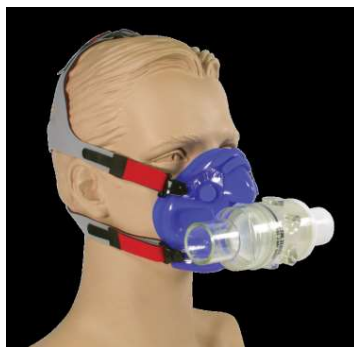


マスク+T-Shape 2WayValve  
+マジックテープヘッドギア



マスク+Y-Shape 2WayValve  
+マジックテープヘッドギア

マスクサイズは、Petite, Extra S, S, M, Lの5サイズがあります。

## ハンスドルフ社2WayValveアセンブリ及び補器

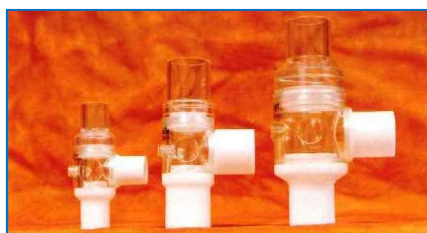


Two-Way T-Shape Non-Rebreathing Valves

2700シリーズ  
T-Shape  
2WayValve



2WayValve+マウスピース+吊り下げホルダ

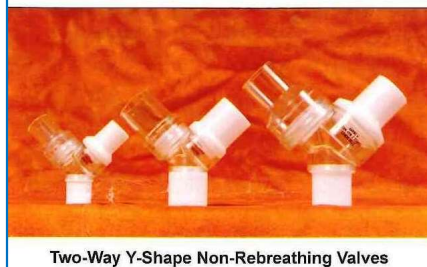

Two-Way Y-Shape Non-Rebreathing Valves

2730シリーズ  
Y-Shape  
2WayValve

7450マスク-2700/2730  
2WayValve直付けアダプタ



2WayValve+ヘッドホルダ

2WayValve 口径各サイズ有ります

Hans Rudolph製マスクアセンブリ及び2Wayvalveは数多くのラインナップがございます。

- ・シングルポート（弁の無い一つのポート）・2Way（吸気、呼気が分離できる弁がついた物）
- ・口径（運動用は35口径、安静・臨床用は22口径が多く使用されています）
- ・形状（T型、Y型）

お問い合わせの際はご希望の構成をお伝えください。特殊アダプターも製作致します。

### 製造・販売元



生体ガス分析のコーディネーター  
**有限会社アルコシステム**

〒277-0005 千葉県柏市柏4-11-17 イワダテビル

TEL:04-7169-7050 FAX:04-7169-1470

HP: <https://www.arcosystem.co.jp>

E-mail: [mail@arcosystem.co.jp](mailto:mail@arcosystem.co.jp)

CAT : ARCOMASK202309A